

LISTA PROVJERE

EpiPen®/EpiPen®Jr (epinefrin)

Prezime / Ime

Datum rođenja

Datum

1

Jeste li Vašem pacijentu dijagnosticirali povišeni rizik od anafilaktičke reakcije ili je pacijent već imao anafilaktičku reakciju?

DA

2

Je li pacijent upoznat kada treba primijeniti adrenalin?

NE



Nastavite KORAK 1

KORAK 1

Jeste li objasnili pacijentu što treba učiniti u slučaju kontakta s alergenom i kada primijeniti adrenalin?

DA



Nastavite KORAK 2

DA, ALI NEMA

EpiPen®/EpiPen®Jr



Nastavite KORAK 2

KORAK 2

Jeste li pacijentu predstavili autoinjektor EpiPen®/EpiPen®Jr i detaljno ga upoznali s primjenom pomoću EpiPen®/EpiPen®Jr uređaja za obuku i prikazivanjem video sadržaja "Kako primijeniti EpiPen®/EpiPen®Jr"?

DA



Nastavite KORAK 3

DA, VEĆ IMA

EpiPen®/EpiPen®Jr



Nastavite KORAK 3

KORAK 3

Jeste li zatražili pacijenta da demonstrira primjenu EpiPen®/EpiPen®Jr pomoću EpiPen®/EpiPen®Jr uređaja za obuku?

DA

3

Jeste li preporučili pacijentu i bliskim osobama redovitu vježbu primjene autoinjektora EpiPen®/EpiPen®Jr?

4

Jeste li preporučili pacijentu da uvijek sa sobom nosi 2 autoinjektora EpiPen®/EpiPen®Jr zbog mogućnosti da se simptomi ne ublaže nakon prve doze?

5

Jeste li savjetovali pacijentu da koristi podsjetnik isteka roka valjanosti autoinjektora kako bi mogao na vrijeme zamijeniti svoj EpiPen®/EpiPen®Jr?

Kako PRIMIJENITI

EPIPEN® EPIPEN® Jr

(adrenalin) auto-injektor 0.3/0.15 mg


Izvadite EpiPen®/EpiPen® Jr iz prijenosne kutije. Ležite tako da su vam noge blago podignute radi bolje cirkulacije krvi ili sjednite ako imate poteškoća s disanjem.

1




Držite EpiPen®/EpiPen® Jr dominantnom rukom (rukam kojom pišete), tako da je palac najbliži plavom zatvaraču te skinite plavi sigurnosni zatvarač.
Zapamtite: "Plavo prema nebu, narančasto prema bedru".

2

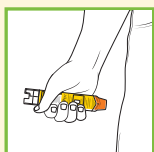

Postavite narančasti vrh na udaljenost od otprilike 10 cm s vanjske strane srednjeg dijela bedra.

3

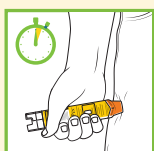

Zamahnite i zabodite narančasti vrh u bedro pod kutom od 90° te držite brizgalicu pritisnutom na tom mjestu 3 sekunde.

4



Uklonite EpiPen®/EpiPen® Jr. Nakon uporabe, narančasti poklopac za iglu automatski se izvlači kako bi prekrivio iglu za injekciju.

5



Nazovite 112, tražite hitnu pomoć i recite "anafilaksija".

Svaki EpiPen® može se upotrijebiti samo jednom. Ako se simptomi ne ublaže, nakon 5-15 minuta možete primijeniti drugi EpiPen®/EpiPen® Jr.

Kako ČUVATI EpiPen®/EpiPen® Jr

- EpiPen®/EpiPen® Jr čuvajte na temperaturi ispod 25°C. Nemojte odlagati lijek u hladnjak ili zamrzavati.
- Spremnik čuvajte u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Adrenalin brzo propada pri izlaganju zraku ili svjetlosti te će postati ružičast ili smeđ.
- Provjerite sadržaj staklenog uloška u EpiPen®/EpiPen® Jr autoinjektoru s vremena na vrijeme kako biste provjerili je li tekućina još uvijek bistra i bezbojna.
- Zamijenite autoinjektor nakon isteka roka valjanosti ili prije njegova isteka ako je otopina promijenila boju ili sadržava čestice (krutu tvar).

Prijavljivanje nuspojava

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.